

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Glow MX6 / MX3 behandlingslampa för bordsplacering



Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
8b Graniczna Street,
byggnad DC 2a 54-610
Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl




Tekniska data

Modell	HD-M3X	HD-M6X
Ingångsspänning	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Ingångsspänning	12V 2A	24V 1,5A
Effekt max	20W	36W
Färg	3000/4500/6000K	3200-5600K
CRI	RA>90	RA>90
Lumen	1800LM	2800LM
Mått och dimensioner	400 x 200 x 40 mm	580 x 190 x 445 mm
vikt	1,4 kg	4,6 kg

Konstruktion och montering av HD-M6X-lampa


1. Skruva fast den nedre delen av stativet (del D) i basen. Skruva sedan fast den övre delen av stativet (del C) i den nedre delen (del D).

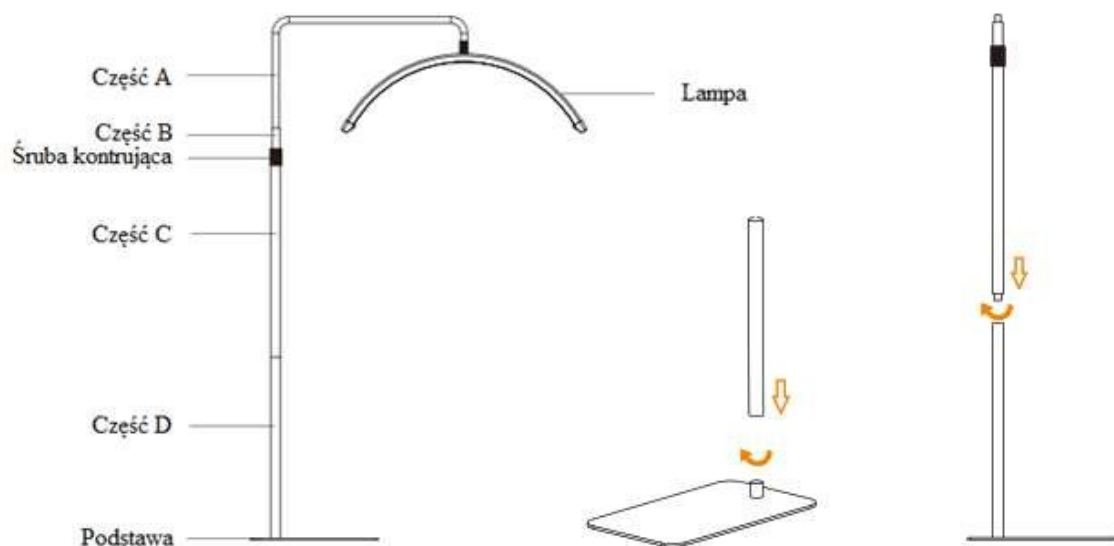


2. Montering av lampan på stativet

- Lossa på fästskruven.
- Dra ut del B ur del C.
- Vrid ihop del A med del B.
- För in del B i del C.
- Dra åt hållarskruven.
- Anslut kablarna för strömförsörjningen.

Obs: Om du placerar lampans docka en bra bit ovanför stativets fot får du den bästa stabiliteten för lampen.

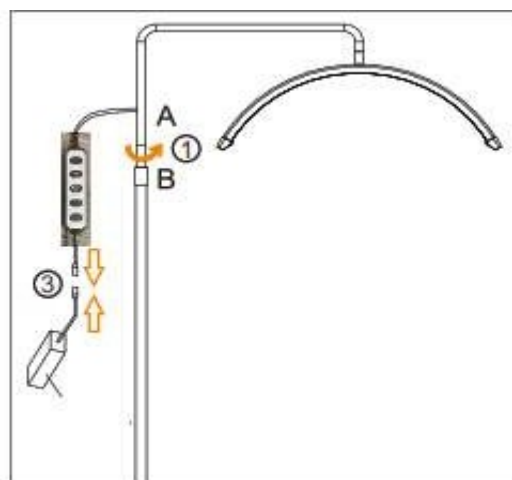

Konstruktion och montering av HD-M3X-lampa

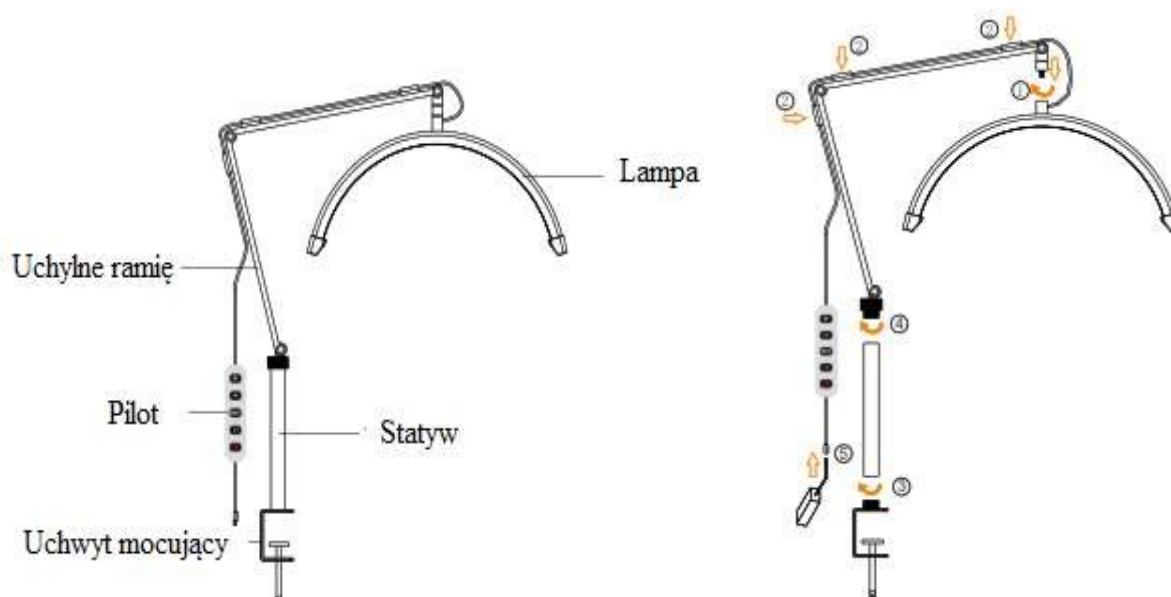


1. Skruva fast lampan i den övre delen av tiltarmen.
2. Montera kabeln i de speciella styrhållarna
3. Montera lampstativet på monteringsfästet
4. Anslut lampan till stativet
5. Anslut strömkabeln till strömförsörjningen

Obs: Det är möjligt att justera vridarmens ledstyvhet med en insexnyckel.

Efter långvarig eller intensiv användning av lamparmen kan det uppstå överdrivet glapp i lederna. Förbättra ledernas styvhet genom att dra åt fästskruvarna.

Varning för detta! Dra inte åt skruvarna för hårt. Det finns risk för att lamparmen skadas om fästskruvarna dras åt för hårt.

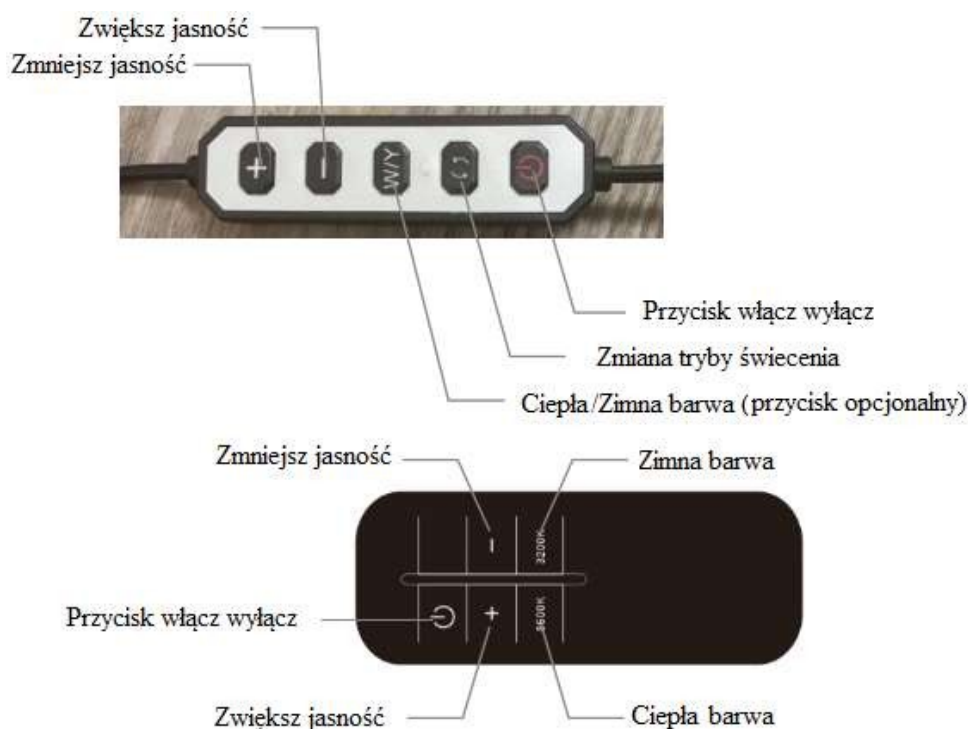

Användning av HD-M3X/ HD-M6X-lampan

Fjärrkontrollen finns som tillval på lampan (vissa modeller har ingen fjärrkontroll)

Knappen för ändring av ljusläge finns som tillval på lampans styrenhet (vissa modeller har inte den här knappen).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP SP. Z O.O.) i följande fall:
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obebaktad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

måste begagnad elektrisk och elektronisk utrustning samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen samt till ACTIVESHOP SP. Z O.O.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.