

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Lafomed vattendestilleri LF-Z500



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025



Scan för
olika
språk



Konstruktion:

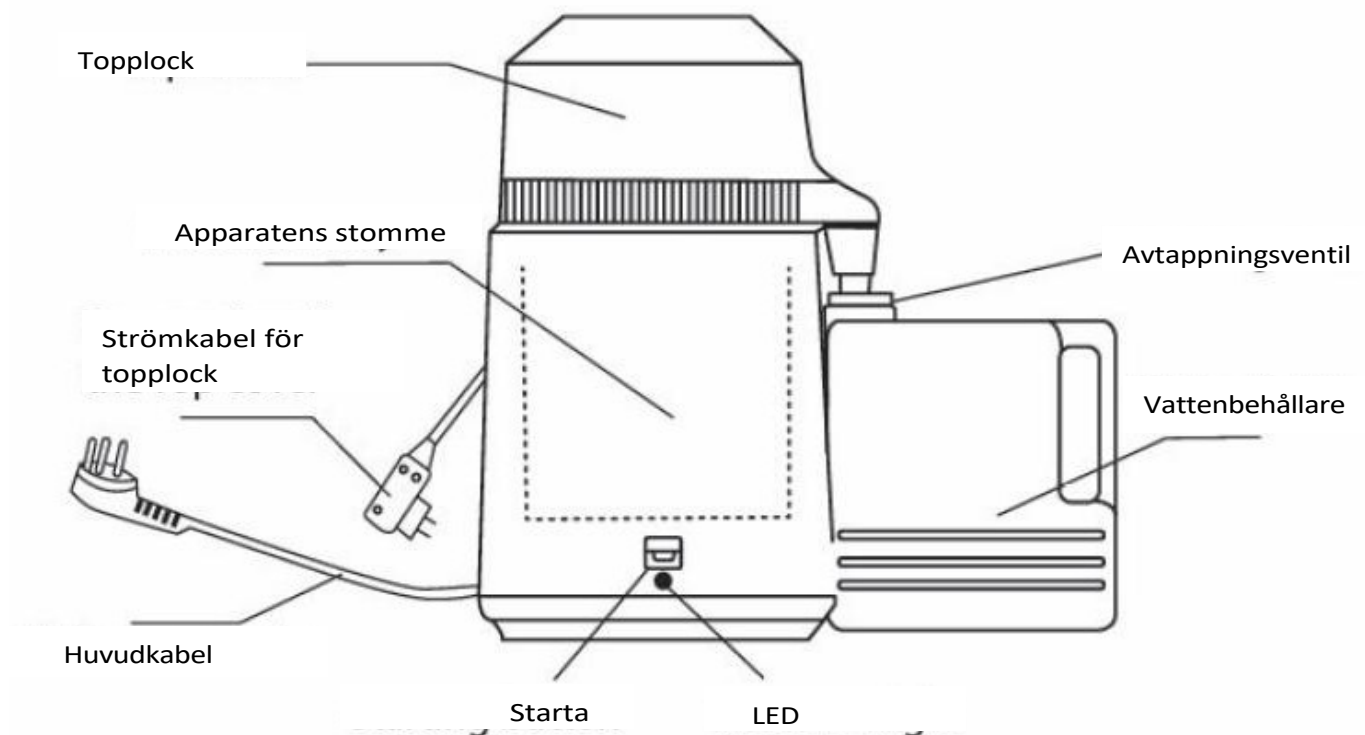

Användning:

- Packa upp lådan och ta ut vattendestillatorn. Den består av två delar: topplocket och apparatstommen. Lyft på topplocket och ta bort vattenflaskan.
- Lyft på topplocket och fyll stältanken med vatten upp till den maximala vattennivån. Obs: Överskrid inte den maximala vattennivån! (Destillationstiden kan bli kortare om du använder varmt vatten).
- Placera topplocket på apparatens stomme och se till att silikonpackningen är korrekt monterad runt hela kanten. Placera apparaten på en stabil yta. Anslut sedan nätsladden från topplocket till apparatens stomme.
- Placera vattenbehållaren så som visas ovan. Anslut huvudströmkabeln till apparaten och sätt in kontakten i ett eluttag. Tryck på "Start-knappen" så startar destilleringsprocessen.
- Efter ca 30 minuter börjar vattnet droppa. Det tar ca 4 timmar att destillera 4 liter vatten (tiden beror på omgivningsförhållanden och temperatur). När processen är klar stängs enheten automatiskt av.
- När flaskan är helt fylld med destillerat vatten och startknappen fortfarande är påslagen ska du koppla bort nätkabeln till topplocket och huvudnät-kabeln för att förhindra elstötar vid kontakt med vatten. Låt hela destilleriet svalna, ta sedan bort topplocket efter 10 minuter och fyll på tanken med vatten. Sätt tillbaka topplocket ordentligt och anslut topplockets nätsladd och huvudnätets nätsladd. Destilleriet kommer att starta om, börja värmas upp och fortsätta processen.
- Drink inte den första flaskan med destillerat vatten. Enheten behöver en destillationscykel för att rengöra sig själv.

Rengöring:

1. Skölj tanken dagligen med rent vatten och förvara den torrt.
2. Ståltankens insida måste sköljas och rengöras med vatten. Kalkavlagringar samlas på tankens botten och bör avlägsnas varje månad med hjälp av ett särskilt rengöringsmedel.
 - Håll tillräckligt med varmt vatten i tanken för att täcka avlagringen.
 - Håll 1-4 teskedar rengöringsmedel i tanken beroende på mängden sediment.
 - Lämna locket öppet och starta cykeln genom att trycka på "startknappen".
 - Låt maskinen gå i 30 minuter, håll sedan ut vattnet och tvätta tankens insida med rent vatten.
 - Om slammet inte är helt borttaget, upprepa processen.
 - Det återstående sedimentet är inte skadligt för kroppen.
3. Vattenflaskan kan tvättas med varmt vatten. Den kommer inte att deformeras.

Var uppmärksam!

- Läs instruktionerna noggrant före användning.
- Apparaten ska användas på en torr, väl ventilerad plats.
- Använd ett lämpligt eluttag och anslut inte apparaten samtidigt som andra apparater för att undvika överbelastning.
- Använd inte en skadad sladd för att förhindra elektriska stötar.
- Koppla bort strömförsörjningen när enheten inte används.
- Sänk inte ner någon del av apparaten i vatten.
- Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- Ta inte bort topplocket när apparaten är i drift. Låt enheten svalna i minst 10 minuter efter destillering för att undvika brännskador.
- Använd inte en stålborste för att rengöra ståltanken - det skadar ytan och underlättar kalkavlagringar. Håll apparatens hölje torrt.
- Startknappen startar en ny destillationscykel först när den föregående har avslutats. Apparaten stängs av automatiskt i slutet av varje cykel. Om en cykel måste avbrytas under drift ska du dra ut huvudströmsladden.
- Enheten måste svalna till under 70°C innan nästa destillationscykel påbörjas för att förhindra fel på grund av hett vatten och för att förlänga destillatorns livslängd.
- Det kan komma ut en lukt av plast från förpackningen - detta är normalt. Tvätta enheten före första användningen.
- Utför inte några reparationer själv. Om du upptäcker ett funktionsfel ska du lämna in enheten till ACTIVESHOP-service.

Tekniska data för apparaten:

- Nominell spänning: 220 V / 110 V
- Nominell frekvens: 50 / 60 Hz
- Nominell effekt: 750 W
- Kapacitet: 4 L
- Avdunstningskapacitet: 1 l/h
- Överhettningsskydd: fränkoppling vid 160 °C


Problem och lösningar:

Inget destillerat vatten:

- Huvudströmkabeln och strömkabeln till topplocket är urkopplade.
- Ingen ström från eluttaget.
- Startknappen är inte intryckt (indikatorlampan lyser inte).
- Inget vatten i ståltanken.

Otillräckligt med destillerat vatten:

- För lite vatten har hällts i tanken (under den högsta vattennivån).
- Gummipackningen på topplocket behöver bytas ut.
- Gummipackningen trycks ihop av filtret - filtret ska vara korrekt placerat (som på bilden nedan).

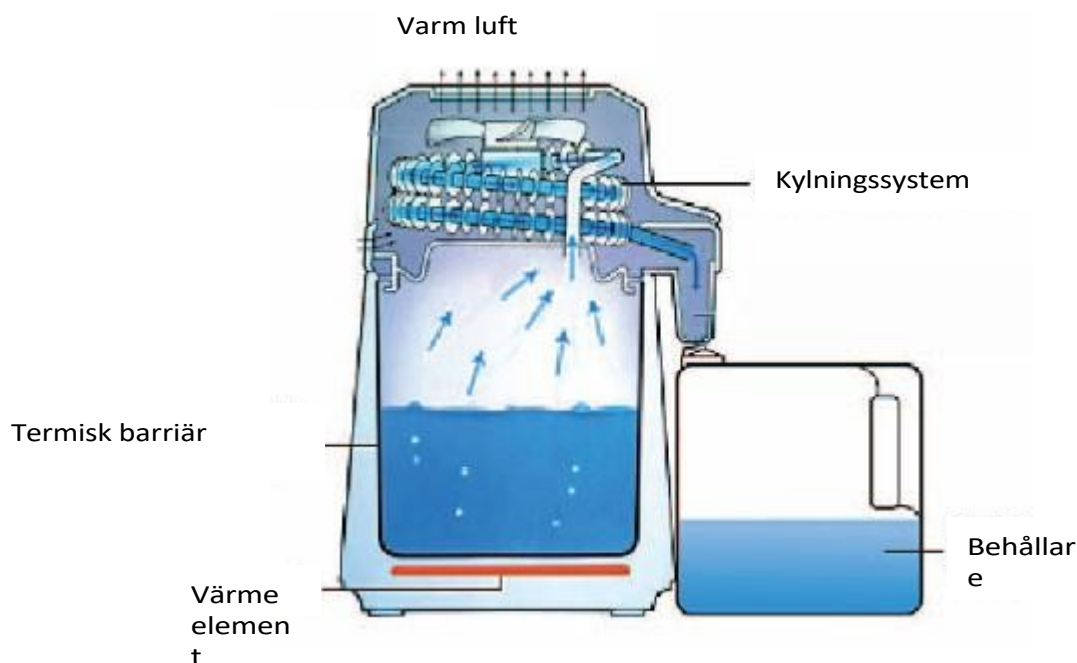

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.