

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Kosmetisk fåtölj hyd. Basic 210



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa igenom innehållet i den bifogade bruksanvisningen och utföra följande steg:

1. Se till att alla förpackningsdetaljer har tagits bort.
2. Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera stolen i det område där den ska användas.

Varning för detta.

Barn och obehöriga personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Mått på enheten:



Längd när den är helt utfälld: 184 cm, höjd min.


65 cm,

Max. höjd 79 cm

Maximal belastning av stolen: 150 kg.



- Fåtöljen är manuellt justerbar med hjälp av spakarna på undersidan. På så sätt kan fotstödet och ryggstödet vinkel justeras.
- Stolens höjd kan justeras med hjälp av sitsjusteringshandtaget.
- Dessutom är armstöden avtagbara för enkel åtkomst till behandlingsytorna.
- Kudden på huvudstödet är också avtagbar, vilket gör det lättare att utföra behandlingar när personen ligger på mage.
- Stolen kan fällas ut till en liggande position.
- Stolen kan roteras 360°.

För att justera ryggstödet/fotstödet läge drar du i spaken u n d e r stolen och lutar sedan ryggstödet/fotstödet till rätt läge.

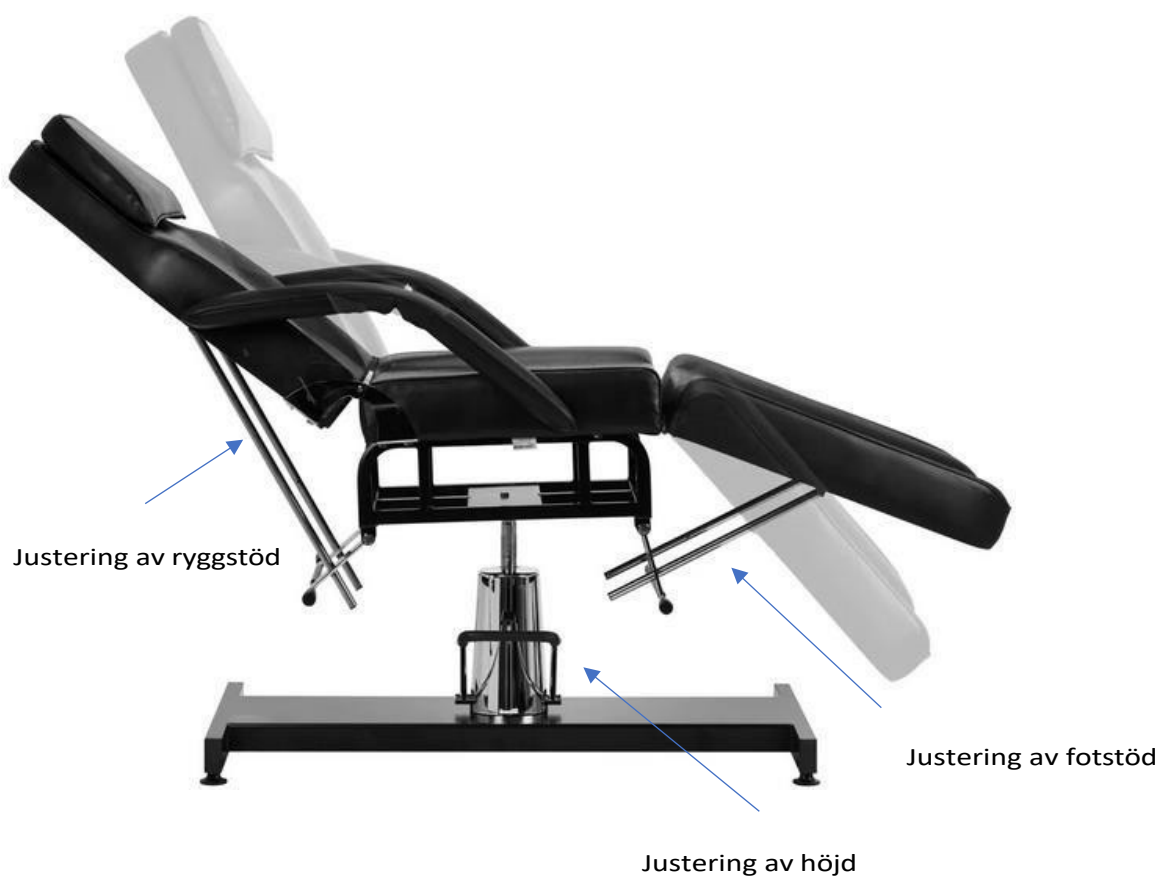

Montering av sits:

1. Skruva fast sitsen på ramen.
2. Montera sitsen på cylindern med en "push fit".
3. Dra åt låsskruven mellan ställdon och sits.
4. Montera konsolerna i ryggstöd och sits.
5. Montera fästena i fotstöd och sits.

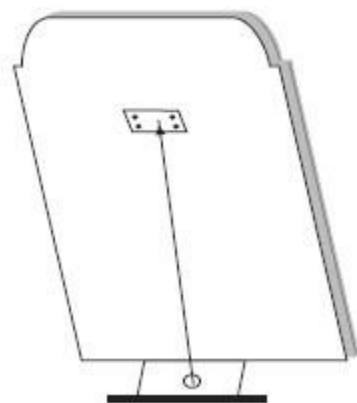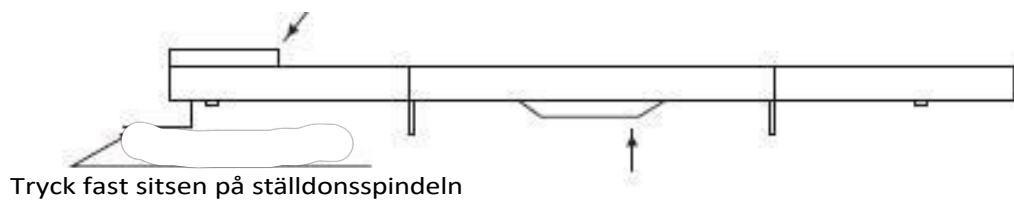

För stödet genom hålet och dra åt med bulten.

På plats på ryggstödet, skruva fast fästet genom att fästa det genom hålet med en skruv (samma sak för fotstöden).

Rengöring och underhåll:

- För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plasttytor

- Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bäst för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn.
- Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Klorbaserade lösningar bör inte undvikas.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet. Utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla från enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan leda till personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömförsörjningskabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Manöverboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Normal drift av låssystemet

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
c) strömkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen, dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.

2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktivet

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till upparbetning. Därför bör de lämnas till lämpliga insamlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.