

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING


Elektrisk kosmetisk stol Sillon Classic 3 motorer

Modell: C501A



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

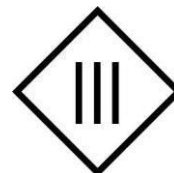

***LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN*.**


Denna bruksanvisning innehåller detaljerad information om drift och underhåll av enheten. Läs de medföljande instruktionerna innan du använder enheten. Använd apparaten enligt beskrivningen. Förvara denna bruksanvisning och se till att alla personer som kan komma att använda apparaten känner till den.

Den elektriska kosmetikstolen Sillon är en professionell utrustning som är perfekt för alla skönhetssalonger. Den är idealisk för massage, kosmetiska behandlingar och även fysioterapibehandlingar. Fåtöljen har utformats för att säkerställa fullständig komfort när man ligger på den under behandlingen. Stolen består av fyra delar och en avtagbar dyna. Det finns handtag på båda sidor om sitsen där fjärrkontrollen kan hängas upp så att den alltid finns till hands.

Produktens lastkapacitet: 150 kg


Den maximala lastkapaciteten för sitsens stomme är 150 kg. Lyft inte mer än den angivna vikten som stolen kan bära.

Hoppa inte på ryggstödet eller lägg mycket tryck på armstöden för att undvika att skada produktens struktur.

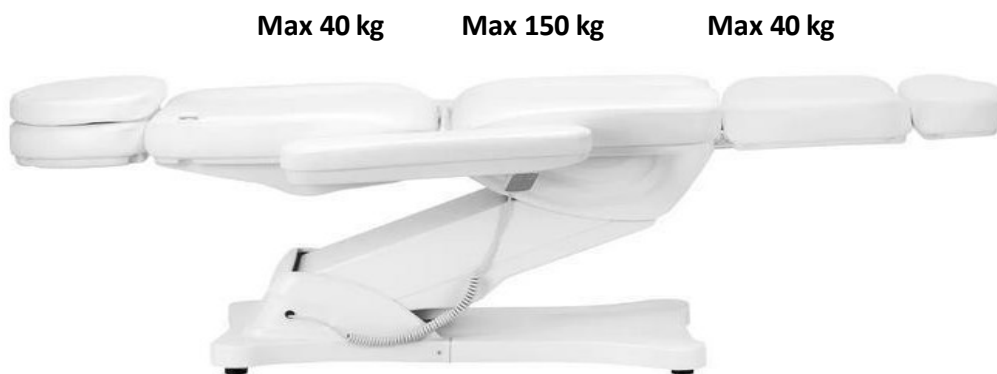

Notera

Förpackningen består av kartong och ytterkartonger med totalt 10 lager papper för att säkerställa skyddet av dina produkter. Vi rekommenderar att du behåller originalförpackningen för framtida bruk, särskilt vid returer under garantitiden. Av säkerhetsskäl behövs två personer för att lyfta stolen ur kartongen. När du lyfter ska du stå på båda sidor om stolens nackstöd och fotstöd. Kom ihåg att stolen endast kan lyftas från huvudstödet och fotstödet positioner, inte från någon av armstödet sidor.

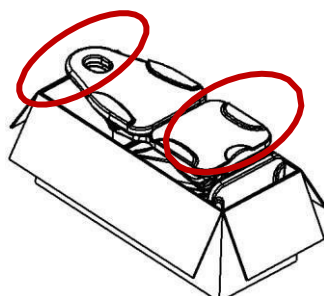

Innan du använder fåtöljen ska du kontrollera att förpackningen är intakt och inte har skadats under transporten. Om det finns något problem, meddela transportföretaget eller

Kundtjänst inom 2 dagar efter mottagandet av enheten. Se till att alla tillbehör är kompletta vid leveranstillfället. Om du upptäcker att tillbehör saknas vid leveransen ska du kontakta kundtjänst i god tid.

Den elektriska kosmetikstolen måste användas i ett slutet, torrt rum. Temperaturen i rummet bör ligga mellan +10° och -40 ° och den relativa luftfuktigheten mellan 30% och 75%. Om den elektriska kosmetikstolen har utsatts för temperaturer under 0° ska du vänta minst 5 timmar innan du använder den så att enheten hinner uppnå rumstemperatur.

Innan du använder den elektriska kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

- (1) Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
- (2) Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
- (3) Placera den elektriska skönhetsstolen på den plats där den ska användas.
- (4) Anslut nätkontakten till ett lämpligt uttag.


Tips! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av den elektriska skönhetsstolen. Av säkerhetsskäl ska du dra ur stickkontakten och inte lämna apparaten utan uppsikt. Dra även ur nätsladden.

Enhetens mått:





Apparatens konstruktion:

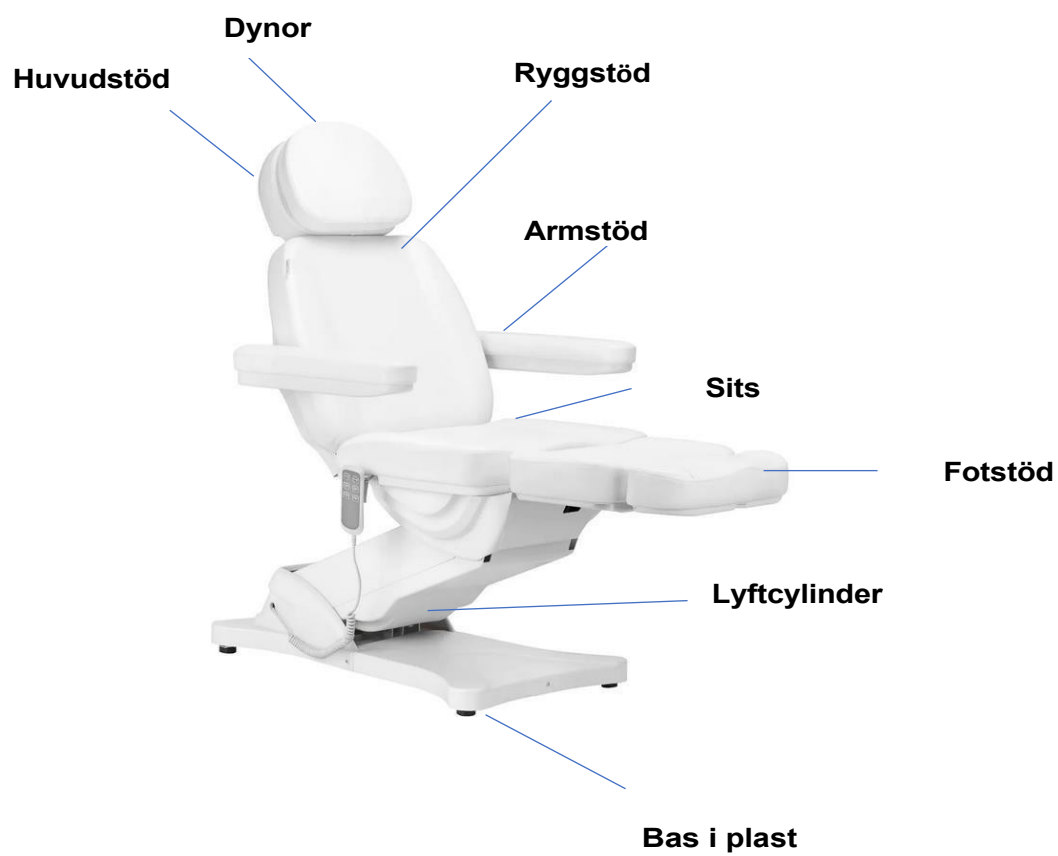

Varning för fotstödet

1. Fotstödet är inte konstruerat för att bära en vuxen persons fulla vikt.
2. Sitt inte direkt på armstödet eller fotstödet.
3. Använd inte den elektriska gynekologiska undersökningsstolen i närheten av brandfarliga gaser.
4. Lyft inte mer vikt än vad stolen klarar av att bära.
5. Se till att avståndet mellan uttagen inte överstiger 2 meter.

Försiktighet

1. Av säkerhetsskäl ska nätsladden alltid anslutas till ett jordat uttag.
2. Knyt inte fast nätsladden i enheten. Om du lyfter eller drar i nätsladden kan den skadas. Se till att nätsladden är lätt att dra ut i en nödsituation.
3. Ta bort nätsladden innan du flyttar den elektriska skönhetsstolen så att den inte fastnar mellan några av stolens delar.
4. Om nätsladden är skadad ska du omedelbart dra ut sladden, inte använda stolen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast originalströmkabeln.
5. Tillåt inte en person som inte utför behandlingen att styra fjärrkontrollen.
6. Placera inga föremål under stolen.
7. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen för att den ska kunna fällas ihop och fällas ut fritt.
8. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt stolen som kan skada enheten.
9. Modifiera inte enheten själv. Om stolen inte fungerar som den ska ska du sluta använda den och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Användning av enheten:

1. Anslut strömkabeln till en extern strömförsörjning 110V~240V.

Metod för montering av armstöd:

Sätet måste vara i horisontellt läge för att armstödet ska kunna monteras på det. Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska vara ordentligt fastsatt. Vrid det åt höger eller vänster så att det går på plats ordentligt. Gör likadant med det andra armstödet.


Armstödet är vinkelrätt mot marken (oberoende av sitsens vinkel). Det kan roteras 180°.



1. Manuell kontrollfunktion (lyfthöjd: sängen är 58~ 82 cm från marken)




2. Manuell kontrollfunktion (rygghöjningsvinkel 0-80 °, benhöjningsvinkel 0-90 °)

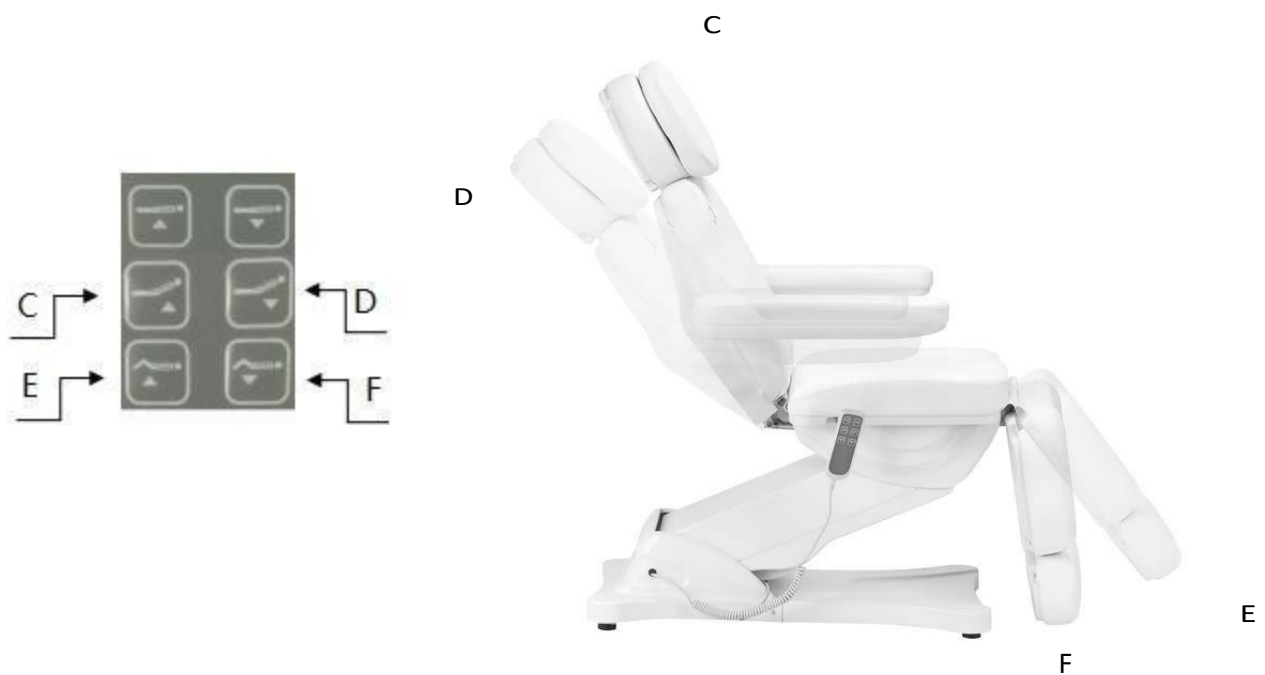

3. Funktion för att dra tillbaka fotstödet (fotstöd, längd: 0~ 12cm)

0~ 12cm

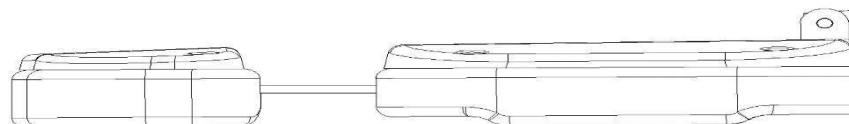

Rengöring och desinficering av apparaten:

- Koppla ur kontakten före rengöring.
- För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinficering en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- För att rengöra ytor och reglage av metall och plast, torka av dem med en fuktig trasa. För att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn fungerar en liten borste bra. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte i höga temperaturer och hög luftfuktighet, utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sätens yta

- Torka sätetsytan jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur kontakten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömkabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess ledningar
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning och felavhjälpning

Problem	Lösning metoder
Den manuella styrningen svarar inte	Kontrollera att gränssnittet som ansluter den manuella styrledningen är löst (kontrollera att det inte finns något problem med kretskortet) kom ihåg att markera kontaktens ursprungliga position.
Motorn svarar inte	Byt position på motorpluggen

För att byta ut kontrollboxen och beställa andra reservdelar, kontakta serviceavdelningen, beskriv problemet innan du kontaktar:

1. Modell
2. Datum för inköp

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen, dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för regler för avfallshantering för denna typ av utrustning. För att skydda miljön

Enligt direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till uppårbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsplatser samt till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

