

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Azzurro 870 elektrisk kosmetisk stol 3 motorer



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024





Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:


1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.

Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Enhetens mått:

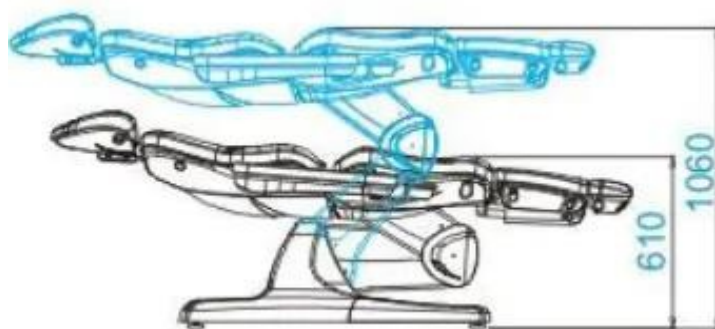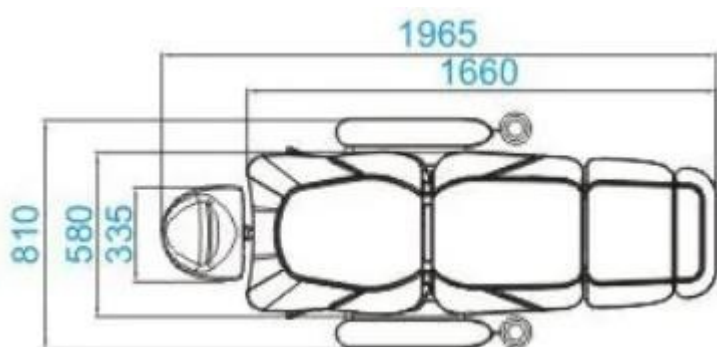

Funktioner för fjärrkontroll:

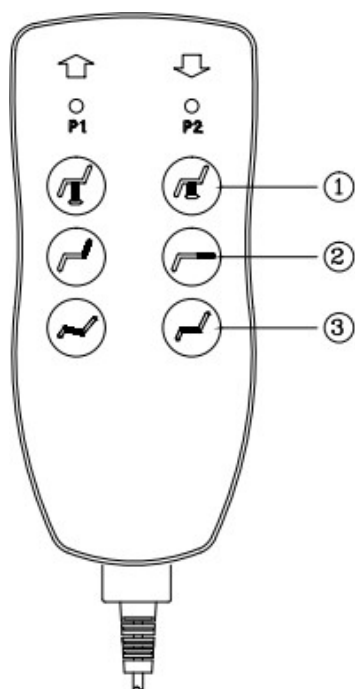


1. Höjdjustering av sitsen (tryck för att höja eller sänka sitsen)
2. Justering av ryggstöd (tryck för att justera ryggstödet lutning)
3. Sitsjustering (tryck för att justera sitsens position av sätet)

1. Justering av fotstödet

Fotstödet regleras manuellt med hjälp av spaken under fotstödet. Dra i spakarna för att justera fotstödet läge.

2. Justera huvudstödet

Lossa ratten bakom huvudstödet, fäll sedan ut huvudstödet till rätt höjd och dra åt ratten.

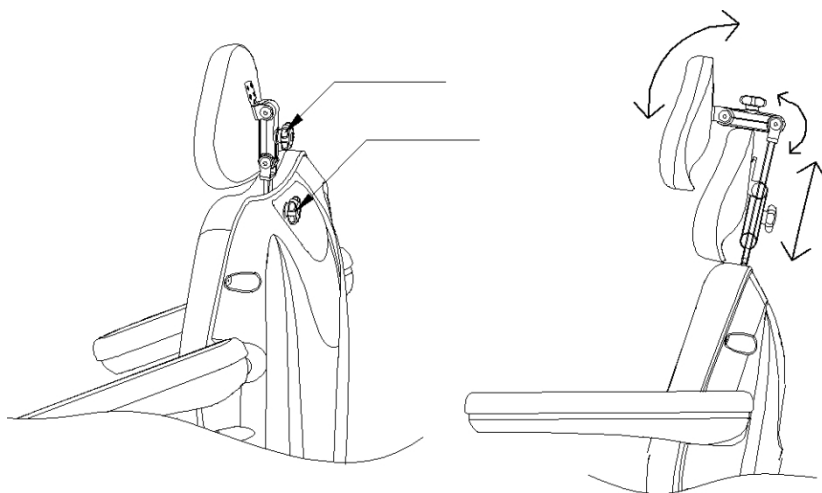

Rengöring och desinficering av enheten:

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användningstillfälle. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet, och utställ inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur enheten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska kosmetikstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömkabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess kablage
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning och felavhjälpning

Problem	Orsak	Lösning metod
När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen svarar inte fjärrkontrollen.	1. Funktionen för respektive knapp har redan nått sitt maximum. 2. Kontrollera att apparaten är ansluten till elnätet.	1. Försök trycka på en annan knapp. 2. Koppla ur apparaten och koppla in den igen.
Apparaten ger ifrån sig konstiga ljud när du ändrar höjden.	Skruven sitter löst	Dra åt alla skruvar

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om enheten endast hanteras av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade konsekvenser under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om begagnad elektrisk och elektronisk utrustning, måste begagnad

elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsställen

Insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk eller elektrisk utrustning. Gamla apparater som är uttjänta innehåller komponenter som kan återvinnas helt och hållet och bör därför lämnas in för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.