

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

SAKURA COMFORT PLUS 806 MASSAGESTOL



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Viktig information:

Läs följande instruktioner noggrant innan du använder stolen för att undvika fysiska skador och skador på egendom under användning.

Varning

Håll barn borta från apparatens rörliga delar.

Denna massagestol får endast användas med en väl jordad strömkälla. Använd endast den strömförsörjning som medföljer massagestolen.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning eller före rengöring för att undvika skador på utrustningen eller livsfara. Använd endast enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning.

Använd inte tillbehör eller delar som inte medföljer eller rekommenderas för användning med massagestolen. Använd inte denna massagestol utomhus.

Använd inte massagestolen om överdraget är skadat. Använd inte massagestolen om inner- och ytterhöljet är skadat.

Täck inte över enhetens kylfläns med något. Låt inte något falla in i apparaten.

Sov inte när du använder denna apparat.

Använd inte apparaten inom en timme efter att du har ätit.

Om din kropp har utsatts för allvarliga skador ska du inte ställa in apparaten på maximal intensitet.

Använd inte en "midjevärmare" massage under längre tidsperioder. Sitt inte på stolen när dina kläder eller din kropp är blöta.

Innan du använder massagestolen ska du öppna kappan för att kontrollera att tyget på ryggklädseln inom massagehulets rörelseområde eller andra delar inte är skadat.

Om någon skada upptäcks ska du omedelbart sluta använda stolen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Efter varje användning ska huvudströmbrytaren ställas i läge "0" och stolen ska dras ur vägguttaget.

Produkten får inte demonteras eller repareras av dig själv.

Använd inte stolen i korta intervaller. Använd inte massagestolen under längre tidsperioder.

Stick inte i apparaten med ett vasst föremål.

Ej tillåtet

1. Använd inte apparaten i en mycket fuktig miljö, t.ex. i ett badrum.
2. Använd inte apparaten omedelbart efter en förändring av omgivningstemperaturen.
3. Använd inte apparaten i en miljö med mycket damm eller frätande gaser.
4. Använd inte denna enhet i trånga utrymmen eller områden med dålig ventilation.

Denna stol är inte avsedd att användas av: personer med osteoporos, hjärtsjukdomar eller personer som bär elektronisk medicinteknisk utrustning såsom pacemaker, personer som har hög feber, gravida eller menstruerande kvinnor, personer som har utsatts för fysiskt eller psykiskt trauma. Barn under 14 år utan tillsyn av vuxen. Personer som är känsliga för värme, t.ex. äldre och barn, bör endast använda den under direkt uppsikt.

1. Kontrollera att spänningen stämmer överens med apparatens specifikationer.
2. Använd inte en våt hand för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Låt inte vatten tränga in i apparaten.
4. Undvik elektriska stötar eller skador på massagestolen.
5. Skada inte kablarna och gör inga ingrepp i stolens ytterkanter.
6. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar på enheten.
7. Om du känner att stolen inte fungerar som den ska ska du omedelbart sluta använda den.
8. Denna massagestol är inte avsedd att användas av personer med fysiska handikapp, sensoriska eller neurologiska störningar eller barn. Om de inte har fått tillsyn och vägledning om användningen av apparaten av personer som ansvarar för deras säkerhet.

9. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med stolens komponenter.
10. Stå inte på massagestolen, hoppa inte på den och placera inget på den så länge det finns luft i dynorna.
11. Stoppa inte in handen eller foten i stolens skrymslen.
12. Stoppa inte in handen, armen eller huvudet i springorna på sitsen för vad- och fotmassage.
13. Placera inte hand, arm eller huvud mellan ryggstödet och ryggklädseln.
14. Placera inte dina husdjur på massagesitsen (ryggskydd, ryggstöd, armstöd etc.).
15. Följ noga användningen av uttag och ledningar och använd AC 220-240 V, 50/60 Hz.
16. Se till att stickkontakten är helt inkopplad i uttaget, annars kan den orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
17. Vid avvikelser eller funktionsfel ska du omedelbart sluta använda apparaten och koppla bort strömförsörjningen.
18. Skada inte nätsladden eller stickkontakten (undvik att skada, bearbeta mekanisk behandling, böjning, vridning, sträckning av nätsladden och stickkontakten eller att placera nätsladden och stickkontakten nära värmaren eller att fästa tunga föremål vid nätsladden och stickkontakten eller binda dem). Använd inte en skadad nätsladd eller stickkontakt, det kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.
19. Förvara inte apparaten i närheten av värme eller eld.
20. Utsätt inte enheten för direkt solljus.
21. Använd inte thinner, bensen eller alkohol.
22. Skjut inte eller dra inte enheten på ett ojämnt golv.

Försiktighet

- Vi rekommenderar att du inte använder enheten i mer än 30 minuter.
- Om ett strömavbrott inträffar ska du lämna enheten och koppla bort strömkällan för att undvika skador.
- Om du känner obehag när du använder apparaten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare.
- Dra inte i nätsladden. Ta tag i kontakten och dra ut den, annars kan du orsaka en olycka eller skada.
- Innan du flyttar enheten ska du justera vinkeln på ben- och fotmassagedelarna tillbaka till ursprungligt läge, annars kan det orsaka skador.
- Avlägsna omgivande hinder innan du flyttar enheten med hjulen - lyft benmassagedelarna till en position något lägre än midjan och rör dig långsamt. Om du använder hjul för att flytta apparaten flytta apparaten med hjälp av hjulen, täck golvet med mjuka mattor etc., annars kan det uppstå repor på golvet.
- Före användning måste enheten placeras på en plan yta, annars kan det leda till en olycka på grund av att enheten välter.
- Om enheten inte används under en längre tid är det nödvändigt att läsa igenom produktinstruktionerna och bekräfta att enheten fungerar normalt och sedan börja använda den.
- Använd inte apparaten tillsammans med andra apparater.
- Pressa inte huvudet, buken eller huden mot massagehjulet.

- Placera inte heller händer eller fötter mellan massagehjulen.
- Placera inte knäna i området för vadmassage.
- Efter användning ska du vrida huvudströmbrytaren till läge "0" och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Använd inte midjevärmningsmassagen under en längre tid.
- Var noga med att stänga av huvudströmbrytaren efter användning.
Om apparaten inte används under en längre tid ska den förvaras på en torr och dammfri plats.

Använd inte

Använd inte midjemassagen för följande personer.

- 1) Personer med akut ryggsmärta, diskbräck, förskjutning i ländryggen.
- 2) Personer som lider av artrit. Följande personer (även om de är friska) bör rådfråga läkare innan de använder denna apparat.
- 3) Personer med muskelatrofi till följd av ålder eller magerhet.
- 4) Personer som har ryggsmärta på grund av ben- eller inälvproblem.
- 5) Personer med benägenhet för stukningar eller benproblem.
- 6) Personer som lider av akut åksjuka.
- 7) Personer som tidigare har genomgått en operation.
- 8) Om du får utslag, rodnad, klåda eller andra symtom som orsakas av att du använder den här enheten, ska du omedelbart sluta använda den och kontakta läkare.
- 9) Dra inte i nätsladden.
- 10) Använd inte enheten om du bär smycken på huvudet och i handen (t.ex. hårnålar, klocka) eller nagelfästen - dessa ska tas bort.
- 11) Om du har något i byxfickan (t.ex. mobiltelefon, nycklar etc.) bör du ta ut det.
- 12) Du måste stoppa driften av massagestolen innan du lämnar sätet. Annars kan du orsaka en olycka eller skada.
- 13) Dra inte ut stickkontakten eller stäng plötsligt av strömförsörjningen under en massage.
- 14) Stå eller sitt inte på ryggskyddet och armstödet. I annat fall kan apparaten välta och orsaka personskada.
- 15) Flytta inte apparaten när någon sitter i massagestolen, eftersom det kan leda till olyckor eller personskador om apparaten välter.
- 16) Använd inte enheten på värmeanordningar som t.ex. en elektrisk filt.
- 17) Placera inte kontrollpanelen på sätet under användning.
- 18) Apparaten har en jordad stickkontakt. Se till att apparaten är ansluten till ett uttag som är utformat för att passa kontakten.

Beskrivning av jordning

Apparaten måste vara jordad. Om det skulle uppstå ett funktionsfel på maskinen kan jordning användas för att minska risken för elektriska stötar.

Maskinen är utrustad med en nätkabel med en jordledare och en jordad stickkontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett lämpligt eluttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Varning

Om apparatens jordledare inte är korrekt ansluten kan det leda till en elektrisk stöt. Om du har frågor om korrekt jordning av denna apparat. Låt en behörig elektriker kontrollera detta. Även om stickproppen och uttaget som är anslutna till apparaten medföljer, kan de inte ändras.

Låt en professionell elektriker installera lämpliga uttag, apparaten har en jordad stickkontakt. Se till att apparaten är ansluten till ett uttag med rätt form på stickkontakten. Apparaten får inte använda en adapter.

Om nätsladden är skadad ska du byta ut den genom att kontakta ett servicecenter som är auktoriserat av företaget.

Användning av

Stolen används för att massera kroppen, lindra trötthet, förbättra blodcirkulationen, påskynda återhämtningen och minska stressnivån.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning - 220-240 V

Strömfrekvens - 50/60 Hz


Effekt - 130 W

Maximal driftstid - 30 minuter

SÄTETS DESIGN

- Kudde för huvudet
- Kudde för axlarna
- Högtalare
- Styrenhet för säte
- Elektrisk panel
- Sidoskydd
- Axelkudde
- Sittdyna
- Vad- och fotkudde
- LED-belysning sits

3D-massage från
nacken till
skinkor

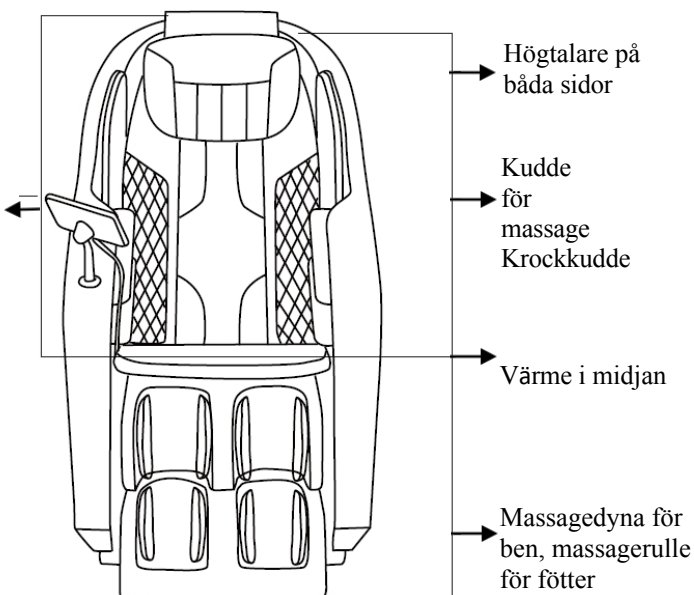


INSTALLATION

Position för installation

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för stolen att luta sig bakåt. Se till att området där stolen ska placeras är rent och att det inte ligger några kablar där.

Varning för

Kom ihåg att ställa huvudströmbrytaren i läge "0" innan du drar ut nätsladden vid förflyttning.

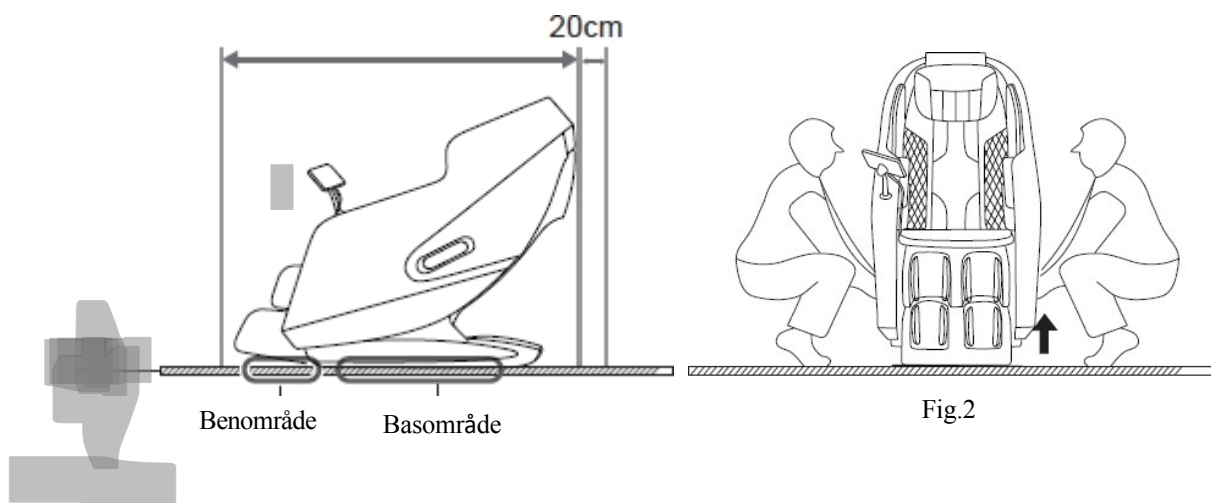

Instruktioner för hantering

- 1) Håll i den nedre delen av basramen på båda sidor och lyft och flytta den sedan (se fig.2). Lyft massagestolen för att flytta den över en känslig yta, t.ex. ett trägolv.
- 2) För sedan in handen i sitsramens nedre del för att hålla i stålramen. Lyft upp den så att du kan fästa plastdelarna på utsidan av sitsramen.
- 3) Placera enheten på golvet.

Försiktighet: Ställ ner apparaten långsamt och var försiktig så att du inte klämmer fötterna. Öppna inte fotstödet förrän apparaten är helt platt. Om du plötsligt släpper handtaget kommer fotstödet att återgå till sitt ursprungliga läge. Golvet kan skadas, så det är tillrådligt att lägga extra skydd på golvet.

FÖRSIKTIGHET

- Dra eller skjut inte apparaten när den inte är monterad.
- Håll inte i sidoplattan eller plastdelen utanför sitsramen när du flyttar den. Underlåtenhet att göra detta kan leda till fel eller personskada.
- Flytta inte enheten när personer sitter på den. Annars kan det orsaka en olycka.
- Innan du flyttar apparaten ska du stänga av strömförsörjningen och se till att ryggstödet och benen är helt nedfällda. Om du inte gör det kan det leda till funktionsfel eller personskador.

En annan metod för att flytta - använd bakhjulet för att flytta massagestolen. Tryck på knappen "  " för att avaktivera alla funktioner. Flytta ryggstödet och benen på enheten till sitt ursprungliga läge. Tryck strömbrytaren längst ned på enhetens baksida till läge "0" (av) och dra sedan ut stickkontakten. Luta stolen nedåt ca 45 grader för att flytta den (se bild 3).

Försiktighet Tryck inte för hårt för att undvika skador på apparaten om stolen skulle falla helt. Om du använder ett hjul för att bära apparaten, placera ett skydd på golvet för att undvika repor på golvet.



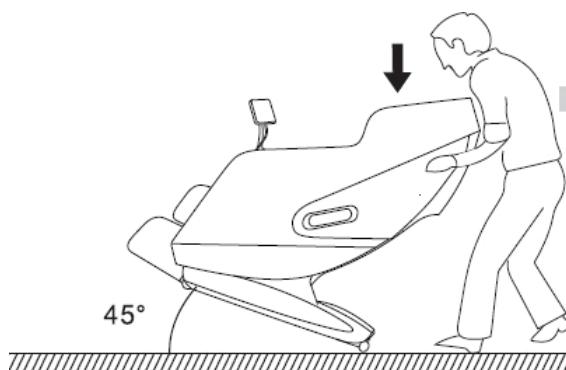


Fig. 3

Kontrollera omgivningen. Se till att det inte finns några människor, djur eller andra föremål i närheten av apparaten.


Se till att det inte finns något mellan maskinens spår. Se till att det inte finns några främmande föremål i benet, foten eller andra ställen innan du masserar.

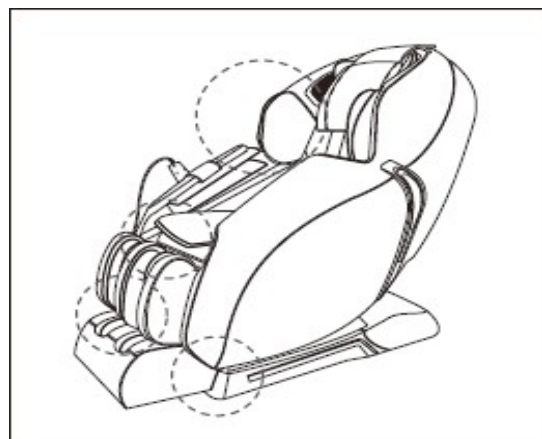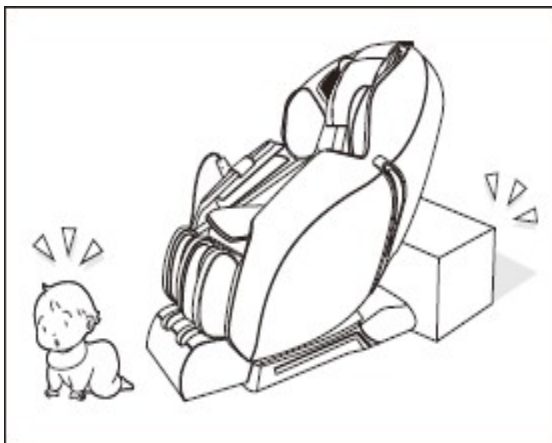

Försiktighetsåtgärder

- Placera inte händer, fingrar, fötter eller huvud i mellanrummet mellan underbenet och sitsen eller armstödet.
- Se till att det inte finns något mellan maskinens alla delar innan massagen påbörjas.
- Placera inte händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och bakstycket.
- Placera inte djur på sätet (sits, ryggstöd, ledstång, ben etc.).

Kontrollera tyget med avseende på skador och sprickor.


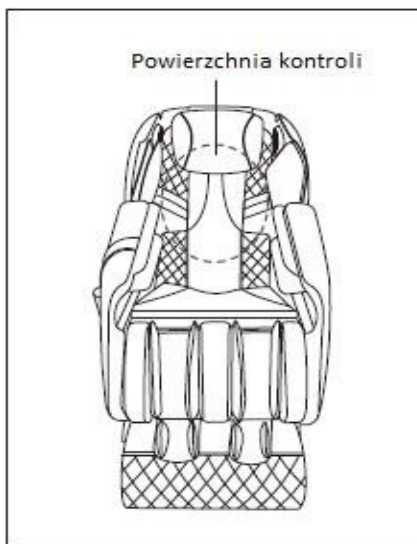


Var uppmärksam på

Före användning ska du ta bort tyget från stolen så att du kommer åt det område som är markerat på bilden. Kontrollera att tyget och andra delar inte är skadade. (Om det finns ett fel, oavsett hur litet det är, ska du omedelbart sluta använda enheten, dra ut kontakten och kontakta ett auktoriserat servicecenter). Om du använder en defekt enhet kan det leda till personskador eller elstötar.

SLÅ PÅ STRÖMMEN

Sätt i den ena änden av nätsladden på baksidan av massagestolens elbox och den andra änden i eluttaget. Ställ huvudströmbrytaren på baksidan av massagestolens elbox i läge "1".

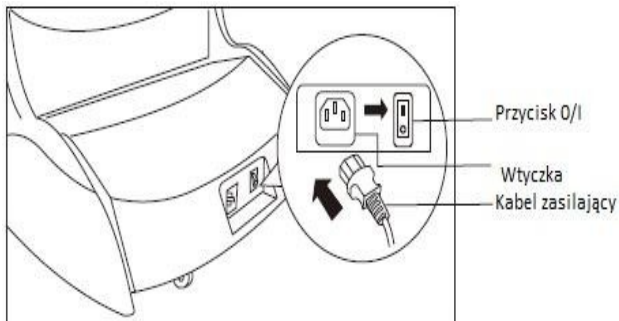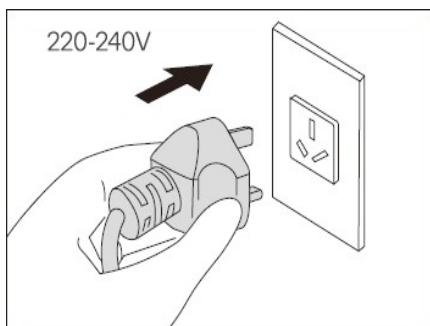


Obs!

- Kontrollera att nätsladden och stickkontakten inte är skadade före användning.
- Se till att det inte finns något mellan alla delar av enheten innan massagen påbörjas. Se till att strömförsörjningen är ordentligt ansluten. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka elektriska stötar eller överhettning och orsaka brand.
- Vänligen använd 220V,50Hz.AC
- Koppla inte in eller ur nätkontakten med våta händer.
- Använd inte transformatorn utan tillstånd. Om du gör det kan det orsaka brand eller överhettning.
- Koppla inte in eller ur din enhet med våta händer

Bluetooth-parning - slå på Bluetooth på din enhet för att söka efter enhetens modellnamn ("**806A**") och ansluta till den. Musik som spelas från enheten kommer att spelas från stolens inbyggda högtalare.

Stolens funktioner

Sakura Comfort plus 806 har ett kroppsdetekteringssystem som känner av axelposition, längd och kroppstyp och justerar massagerullmekanismen. När stolen är påslagen Massagerullarna börjar röra sig upp och ner, samlar in information och anpassar stolen till dina mått. I slutet av kroppsdetekteringsprocessen hörs ett pipande ljud, och du har då fortfarande en stund på dig att justera din sittposition med hjälp av knapparna UP och DOWN. Om kroppsdetekteringssystemet inte fungerar korrekt ska du kontrollera att du sitter i upprätt position. Du kan också flytta dynan bakom huvudet uppåt så att rullarna lättare kommer åt nackområdet.

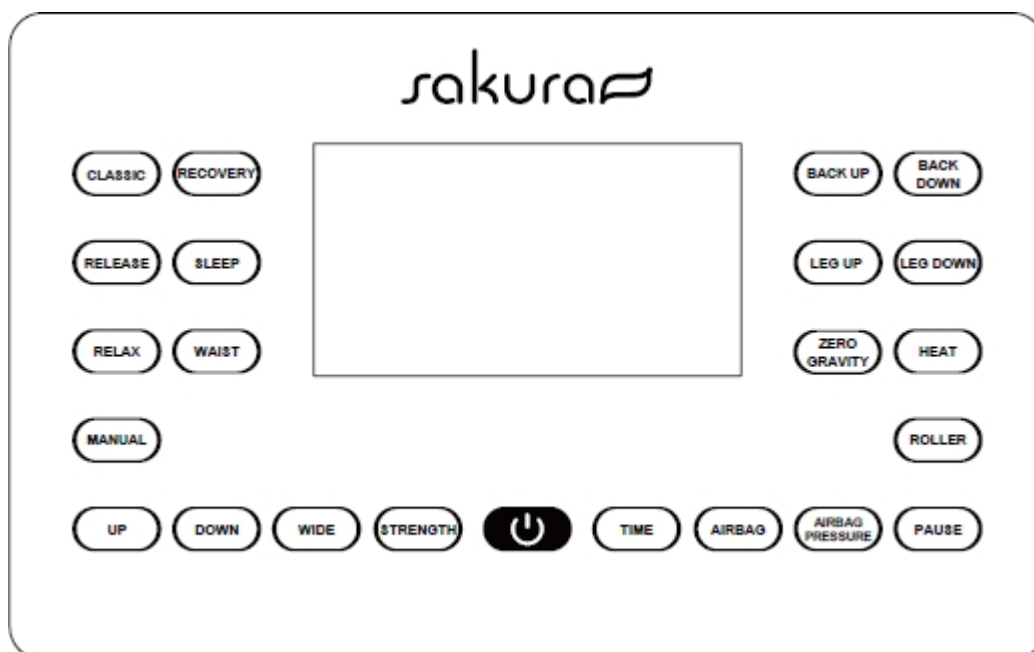

	Massagestolen lutar automatiskt i en vinkel för att börja känna av armpositioner. Vid avstängning släcks displayen och massagestolen återgår till standby-läge.
	I det här läget masseras nacke, midja, höfter och andra delar av kroppen jämnt med hjälp av knådning, strykningar och punktmassage. Kombinationen av rörelser är rik i varierande grad av intensitet, med en tillfällig stretchfunktion.
	Tryck på denna knapp för att aktivera alla funktioner. Tryck sedan igen för att fortsätta det avbrutna programmet.
	Detta läge, som bygger på knådning, massage och andra tekniker, ökar varaktigheten, styrkan och rytmen i massagen av nedre delen av rygg.
	Detta läge fokuserar främst på nacke och axlar och erbjuder knådning av nacken, massage av axlarna och strykningar.
	Ett läge som är utformat för massage under sömnen, inklusive nack-, midje-, ländryggs- och vaggafunktion.
	Detta läge är främst inriktat på thaimassage, med bland annat knådning, massage, strykningar och andra funktioner.
	Ett läge för midjemassage, knådning, strykningar och massage.
	När den är påslagen lutar sätet maximalt och benen lyfts till sin högsta nivå. När den stängs av återgår ryggstödet till en viss vinkel och fotstödet sjunker till en viss nivå.
	Tryck för att höja sitsen och stanna vid den aktuella positionen.


BAKÅT NER	Tryck för att sänka sitsen och stanna vid aktuell position.
BEN UPP	Tryck för att höja fotstödet och stanna vid aktuell position.
BENE T NEDÅ T	Tryck för att sänka fotstödet och stanna vid aktuell position.
STRENGHT	Tryck för att justera massagens intensitet. Varje tryck ändrar en av de 5 justeringsnivåerna.
BREDD	Tryck på denna knapp för att justera massagehuvudets "bredd, medium och smal". Bredden ändras varje gång. (Obs: denna funktion fungerar endast i manuellt läge under knådning, massage, knackningar och fingertryck).
MANUELLT	Automatiskt läge kan ändras till manuellt läge. Olika lägen finns att välja mellan: massage, knådning, klappning, knackning, shiatsu, knådning och knackning, knådning och skrapning, sekventiell cykel.
VÄRME	Slå på/av värmefunktionen. (Standard är av vid uppstart).
RULL	Aktivera/avaktivera rullen.
AIRBAG- TRYCK	Totalt 5 intensitetsnivåer kan ställas in. Som standard är medelnivån inställd vid uppstart. Tryck en gång på knappen för att växla till nästa nivå, genom att cykla igenom.
AIRBAG	Växlar positionen för airbagmassagen.
UP	Tryck på uppjusteringsknappen för att flytta massagemekanismen uppåt. Kan justeras både i standby-läge och under drift.
DOWN	Tryck på nedjusteringsknappen för att flytta massagemekanismen nedåt. Kan justeras både i standby-läge och under drift.

	Tryck för att ställa in enhetens drifttid. Varje klick ändrar tiden mellan 5, 10, 15, 20, 25 och 30 minuter.
---	---


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Varning Barn får inte använda denna apparat. Låt inte barn leka på massagestolen eller klättra på vader, sits, fotmassage, ryggstöd eller armstöd. Detta kan orsaka olyckor eller skador.


1. Efter användning, tryck på "⏻" för att stänga av stolen, den kommer då att återgå till sitt ursprungliga läge (upprätt läge).
2. Ta långsamt bort benen från benmassagesektionen.

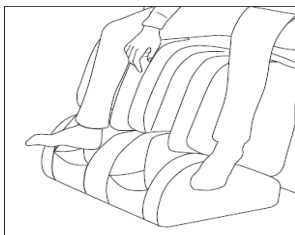

3. Stäng av stolen med hjälp av knappen

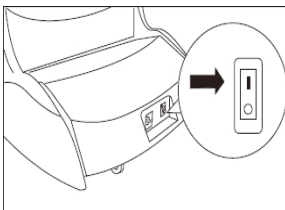

4. Koppla bort stolen från huvudströmförsörjningen.

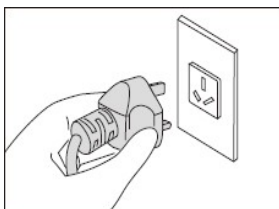


RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengöring av läderytor:

Torka av lädret med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier som t.ex. thinner, bensin eller alkoholbaserade preparat för rengöring. Vid användning av tillgängliga på för lädervårdsprodukter (trasor), följ instruktionerna. Doppa en mjuk trasa i vatten med neutralt 3-5% rengöringsmedel och vrid ur den ordentligt. Torka av läderytan


läderytan med en mjuk trasa och vänta tills den torkar. torka. Använd inte en fläkt för att torka ytan. Använd inte denim eller färgade tyger för att torka av enheten, eftersom tygets färg tygets färg kommer att färgas av på syntetlädrets yta. Om du använder hårfärgningsmedel ska du täcka kontaktytan med en handduk eftersom konstlädret kan ändra färg. Om du har haft problem med att få bort smutsen kan du doppa ett oxidbaserat rengöringsskum i ett neutralt rengöringsmedel och torka bort smutsen med det.

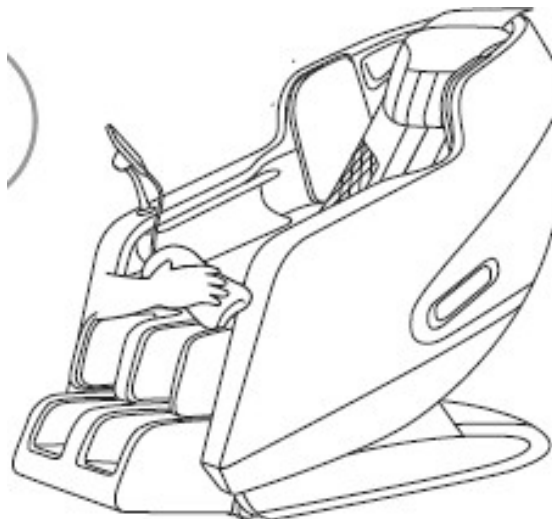

Rengöring av plastytor

Torka av lädret med en mjuk, torr trasa. Doppa en mjuk trasa i vatten som innehåller neutralt rengöringsmedel, vrid den torr och torka av plastytorna.

del av apparaten. Använd inte kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkoholbaserade preparat etc. Låt torka.

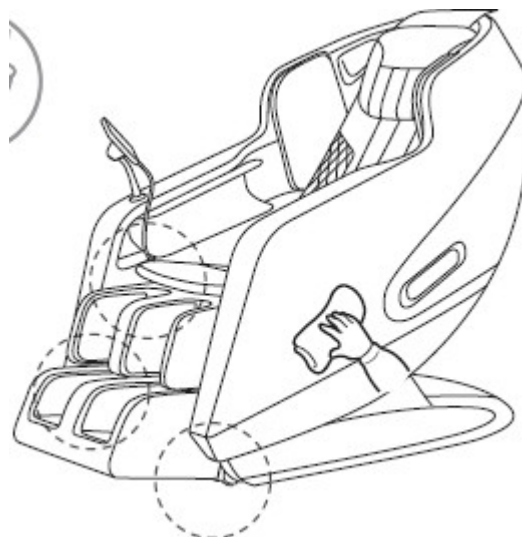

FRÅGOR

* Ljud från massagestolen

Ljudet från massagestolen orsakas i allmänhet av strukturen på massagerullarnas rörelse.

* Kan höjden påverka kvaliteten på massagen?


När användare med en längd på mindre än 145 cm eller mer än 180 cm använder en överkroppsmassage och en vad- och fotmassage samtidigt, kan de uppleva en svagare massage i vad- och fotområdet.

* För mycket tryck på fötterna

Använd knappen „airbag pressure“ för att ställa in airbagens effekt till det lägsta läget. Att minska massagekraften i vadoområdet kan också minska känslan av fottryck.

* Vad ska vi vara uppmärksamma på under transporten?

- Var uppmärksam på följande:
- Luta massagestolens ryggstöd till det lägsta läget för att underlätta förflyttningen.
- Sitt inte på sitsen under transporten.
- Tryck på knappen för att slå på strömmen.
- Tryck på nollgravitationsknappen för att luta ryggstödet helt bakåt.
- Ställ huvudströmbrytaren i läge "0" och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Om det finns en originallåda ska du se till att nätsladden inte är lindad runt enheten och lägga den på sitsens yta.
- Om originalkartongerna inte finns tillgängliga bör sitsen säkras noggrant för att förhindra repor och vibrationer under transporten.

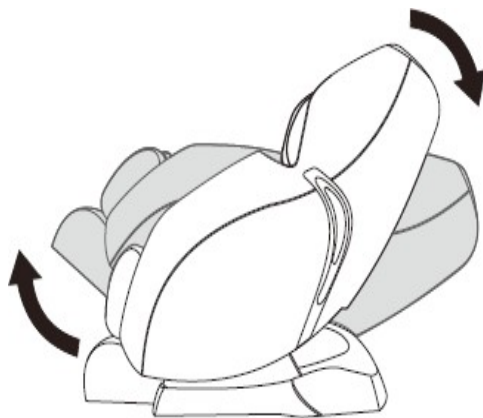

* Kan personer med hälsoproblem använda massagen?

Personer som har hälsoproblem bör rådfråga läkare innan de använder den här produkten. Massagen, som kallas "taktill tryckstimulering", lindrar muskelspänningar och ökar blodcirkulationen genom att trycka på musklerna. Beroende på de olika patogenerna kan massage förvärra tillståndet. Rådgör med din läkare innan du använder denna produkt.

* Hur stor är energiförbrukningen per månad vid användning av denna produkt?

Enligt 30 minuter per dag är energiförbrukningen för denna produkt cirka 1,5 kWh per månad.

* Spelar det någon roll att jag kan känna skillnaden i massagestyrka mellan vänster och höger massagehjul?

På grund av rörelsens struktur under massagen kan du känna skillnaden i styrkan på vänster och höger massagehjul. För att simulera den mest naturliga massagetekniken använder stolen en rörelsestruktur som gör att det vänstra och det högra massagehjulet växelvis kan träffa ryggen. Under massagen kan det vänstra och det högra massagehjulets specifika position i kontakt med ryggen skilja sig något, vilket leder till en olika känsla av massagekraft på vänster och höger sida.

*För vilken åldersgrupp är massagestolen lämplig?

Denna massagestol är lämplig för personer mellan 18 och 75 år. Minderåriga och äldre personer måste åtföljas av en vårdnadshavare när de använder denna apparat.

Problem	Orsaker och lösningar	
Produkt nie działa	Wtyczka zasilania produktu nie jest podłączona, a główny przełącznik zasilania nie jest włączony	Podłącz wtyczkę zasilania i ustaw przełącznik zasilania do pozycji „1”
Przestał pracować podczas masażu	Skończył się czas masażu	Jeśli chcesz ponownie wykonać masaż, włącz go
	Przegrzanie silnika z powodu zbyt długiej pracy	Wyłącz fotel i odczekaj, aż silnik ostygnie
Podczas masażu zatrzymują się kółka masujące, a fotel przy dużym oporze generuje alarmy dźwiękowe.	Fotel napotyka zbyt duży opór	Wyłącz zasilanie i wyreguluj pozycję siedzącą, a następnie włącz ponownie fotel
Nie można regulować pozycji nóg	Możliwe przeszkody w okolicach fotela	Usuń przeszkody w okolicy fotela przed jego uruchomieniem
Koło masujące nie osiąga pozycji ramienia ani szyi	Wykrywanie barku może być niższe niż rzeczywista pozycja	Po dopasowaniu pozycji siedzącej ponownie zbadaj pozycję barków

Om stolen har slutat fungera under en massage kan det också bero på för hög belastning.

Specifikationer:

Produktnamn: SAKURA COMFORT PLUS MASSAGESTOL

Produktnummer: 806

Nominell spänning: 220V

Nominell frekvens: 50Hz Nominell

effekt: 120W

Maximal drifttid: 30min

Vertikal höjd: 1480 x 770 x 1130mm Horisontell

höjd: 1730 x 770 x 890mm Bruttovikt: 104kg

Nettovikt: 90 kg

Kabellängd: 190,5 cm

Rumstemperatur under användning: 0C~35C° Relativ

luftfuktighet: 20%~80%

Förvaringstemperatur: -5C~35C°

Luftfuktighetsnivå: 20%~80%

Säkerhetsfunktioner: Överhettnings- och överspänningsskydd Maximal

användarvikt: 100 kg

Ingår: massagestol, kontrollpanel, nätsladd, instruktioner

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade service som tillhandahålls av ACTIVESHOP SP. Z O.O. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om säker användning av utrustningen så att så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater

ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjanta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

