

ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

Azzurro 891 elektrisk kosmetikstol



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024




Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Se till att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera kosmetikstolen i det område där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.

Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Apparatens mått:

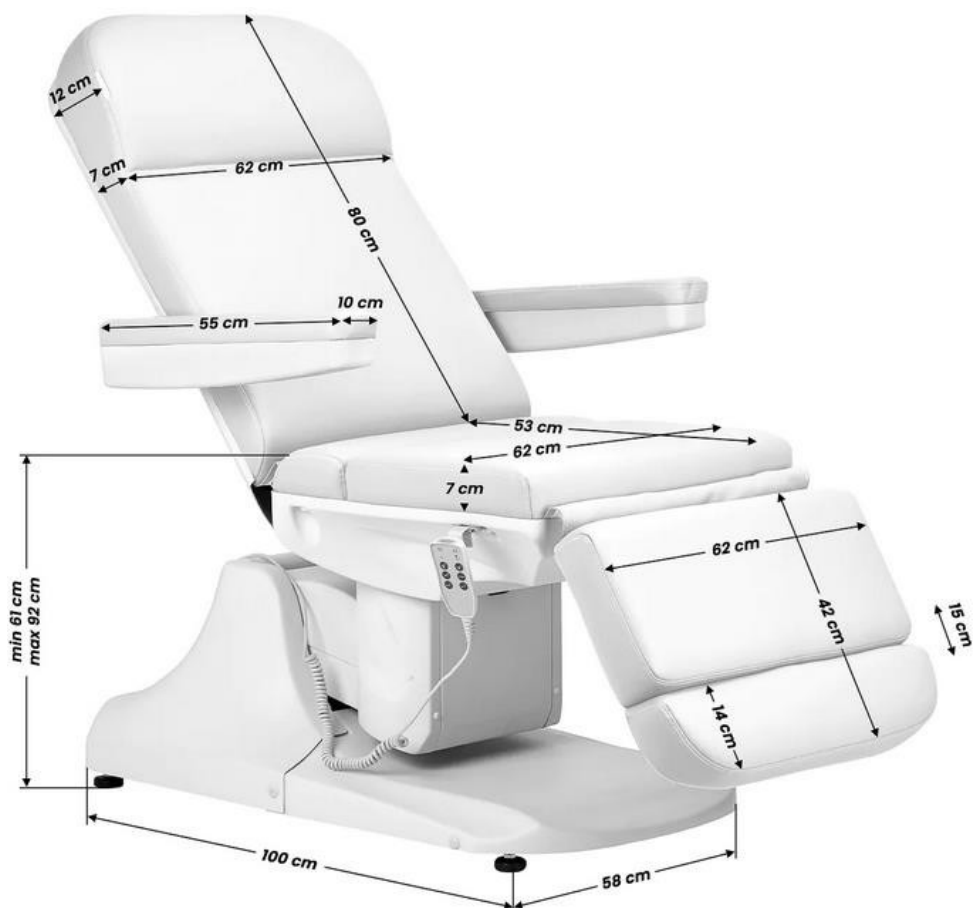

Apparaten styrs med en fjärrkontroll.

Fjärrkontrollens funktioner:



1. Höjdjustering av sitsen från 61-92 cm (tryck för att höja eller sänka sitsen).

2. Justering av ryggstödet vinkel

3. Justering av fotstöd (tryck för att ändra fotstöds position)

Justering av fotstöd:

Fotstödet har en justeringsmöjlighet och kan förlängas från 0-15 cm. För att förlänga fotstödet vrider du på ratten på undersidan och förlänger fotstödet till önskad längd.



Rengöring och desinfektion av maskinen

Koppla ur enheten före rengöring.

För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plasttytor

För att rengöra metall- och plasttytor och reglage, torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

Bästa fungerar bäst är rengöring med en mild lösning rengöringsmedel. Ammoniak i de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet, u t s ä t t inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sitsens yta

- Torka sätesytan jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Koppla ur kontakten före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som är godkända av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska.
4. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Åtgärder för underhåll

Kontrollera manöverorganen och deras kablage en gång i veckan. Kontrollera skicket och funktionen hos följande delar minst en gång i halvåret:

1. Strömkabel och dess infästning
2. Motorns kablage
3. Kontrollboxen och dess ledningar
4. Om tillbehören är monterade
5. Låssystemets normala funktion

Om du upptäcker några fel ska du sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut manöverdonet/styrenheten.

Om någon del av utrustningen är skadad ska du dra ut nätkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning och felavhjälpning

Problem	Orsak	Lösning metod
Fjärrkontrollen svarar inte när en knapp på fjärrkontrollen trycks in	Den aktuella knappens funktion har redan nått sitt maximum.	1. Försök trycka på en annan knapp
Enheten ger ifrån sig konstiga ljud när du justerar höjd	Skruben sitter löst	Dra åt alla skruvar