

Gynekologistol på pelare

Under de senaste åren har vi tagit fram flertalet nya produkter runt den stilrena och starka pelarmotorn från Linak, bland annat fotvårds- och provtagningsstolar. Den feedback vi fått från kunder gällande dessa har varit oerhört god. Nu har turen kommit till gynstolen.

Genom sin moderna design och robusta konstruktion har den nya gynstolen från Sjöbloms alla de egenskaper som krävs av dagens sjukvård. Dess ergonomiska utförande gör den mycket användarvänlig.

En låg lägsthöjd och hög högsta höjd ger goda inställningsmöjligheter, vilket både hjälper personalen att kunna arbeta ergonomiskt korrekt samt underlättar patientens av- och påstigning.

Benstöd, utdragbar benplatta, patienthandtag, elektrisk ryggstöd, nackkudde, centrallåsta hjul, sköljskål och pappersrullhållare ingår, liksom såväl hand- som fotkont.

Hur den regleras

Den nya gynstolen har tre motorer, så både höjd, sätesvinkel och ryggstöd regleras elektriskt.

Benstöd

Benstöden bygger på en kulle och är därför enkla att finjustera till lämplig position. De är även fullt inställbara i höjd samt framåt/bakåt på tillbehörs-skenan. Den svarta del där man vilar benen är gjord i ett användarvänligt och lättrengörigt svart integralskum, ett slags trögsaum. Benstöden kan rengöras med de vanliga rengörings- och desinfektionsmedel som sjukvården använder.

Patienthandtag

De kromade patienthandtagen är ett utmärkt stöd för patienten när man sätter sig eller ställer sig upp. De kan mycket enkelt flyttas längs tillbehörsskenan. Både patienthandtag och benstöd kan också mycket enkelt tas bort helt, vilket är en god hjälp exempelvis när en rörelsehindrad patient ska flyttas från rullstol eller säng.

Chassi och hjul

Det helsvetsade stålchassit är pulverlackerat i en grå nyans. De rejäla hjulen med 100 mm diameter låses och frigörs med ett enda tryck - så kallad centrallåsning. Detta gör stolen lättplacerad i undersökningsrummet och möjliggör korta akuta transporter med patienten sittande.

Sköljskål

Sköljskålen under sätet ingår. Rostfritt stål. Yttermått 34x21 cm, inermått upptill 30x20 cm.

Dynor

Hög liggkomfort, stoppade med skumplast, klädda i konstläder. Ett stort antal färger finns att tillgå, för att kunna matcha rummets dekor. Ryggstödsram skyddar dynan från stötar.

Motorer

220-240 V / 24 V. Fot- och handreglage ingår. Kan erhållas med batteriuppbäckning.

Benämning

Gynekologistol elektrisk på pelare med integralbenstöd

Art nr

016-5000


Tillbehör

Batteriuppbäckning 010-5000-70
Undersökningslampa LED 15 473 000
Fäste för lampa på stol 090-5004



Mått & vikt

Längd: 134 cm
Längd inkl benplatta: 174 cm
Bredd: 55 cm
Sithöjd: 55-95 cm
Max höjd vid benplattans ytterkant när den är max ute och stolsvinkeln är max uppe: 115 cm
Ryggstöds längd: 92 cm
Ryggstöds vinkel: 10-60°
Sätesplattans längd: 39 cm
Chocklägesvinkel -22°
Vikt: 97 kg
Lyftkapacitet: 165 kg

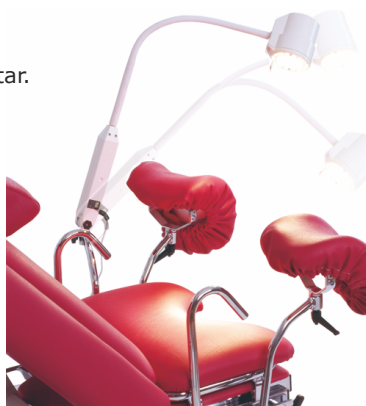

De undersökningslampor vi säljer kan monteras direkt på stolen.